

## FILTRES MEDICAUX JETABLES TOUS GERMES ET ANTI-LEGIONELLE

- Filtres médicaux jetables 0,2 µm absolu pour douches et lavabos
- Durée de vie de 35 jours
- Emballés individuellement et stérilisés par rayonnement gamma
- Indications sur chaque emballage individuel
  - Numéro de lot
  - Marquage CE (classe I, règle 1)
  - Date de péremption
  - Code-barres
- Formés de 2 parties : génère moins de déchets que les filtres entièrement jetables
  - Capsule filtrante, jetable
  - Connexion à conserver (manche de douche ou raccord robinet)
- Manuel d'utilisation fourni dans chaque boîte

### ► CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- **Média filtrant** : membrane polyéthersulfone (PES) hydrophile en fibre creuse
  - Taille des pores : 0,2 µm maximum
  - Diamètre interne : 0,8 mm
  - Point de bulle : 2 bar
  - Efficacité
    - Bactéries : > log 6
    - Champignons : > log 4
- **Compatibilité au chlore** : 1200 ppm d'hypochlorite pendant 10h réparties sur la durée de vie du produit
- **Durée de vie** : 35 jours
- Filtres munis d'un **clapet anti-retour** pour protéger le réseau des risques de contamination

### ► CAPSULE DOUCHETTE



Sortie douchette

### ► CAPSULE ROBINET




Sortie droite

## ► MATERIAUX DE CONSTRUCTION

- **Média filtrant** : polyéthersulfone
- **Couche support** : polyvinylpyrrolidon
- **Carter de filtre** : acrylonitrile butadiène styrène
- **Clapet anti-retour** : silicone VQM
- **Joint** : EPDM

## ► DIMENSIONS

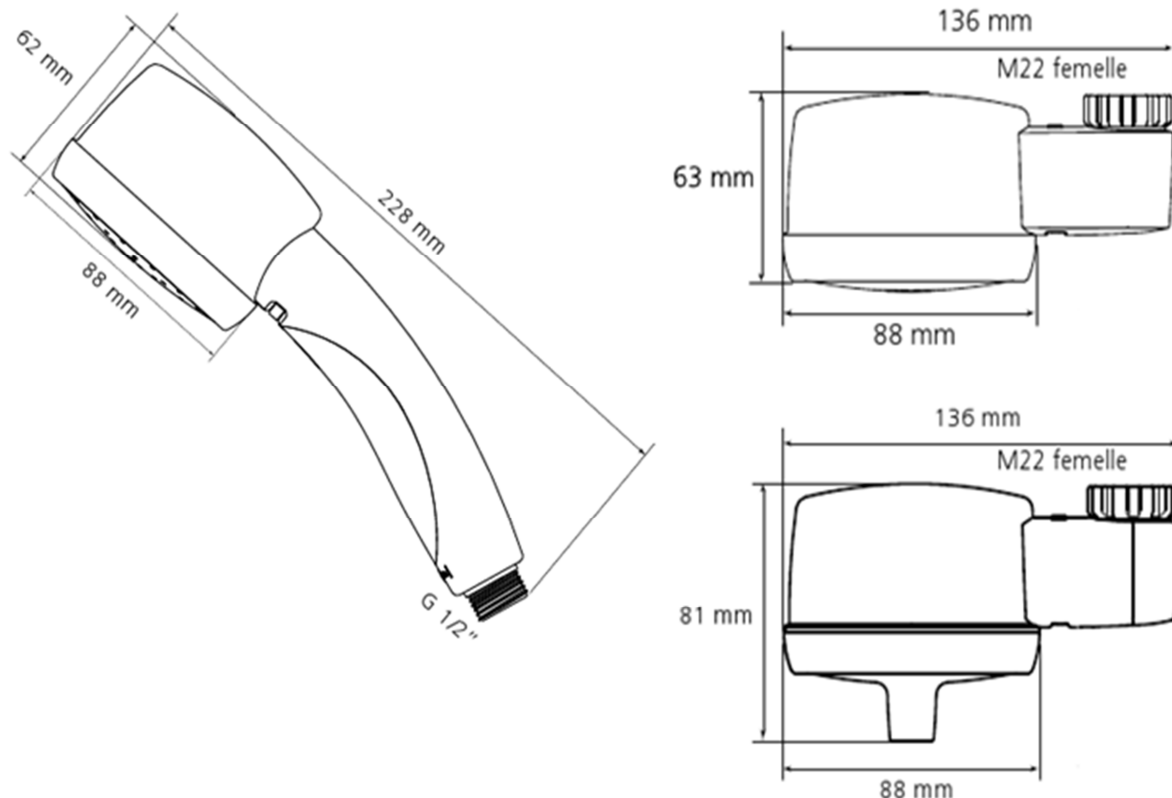

- **Surface de filtration** : 1000 cm<sup>2</sup>
- **Poids à sec** :
  - Kit de démarrage (capsule filtrante + connexion) : 240 g
  - Capsule de remplacement : 150 g
- **Connexions** :
  - Filtre douche : ½" BSP mâle
  - Filtre robinet : 22 mm fileté mâle (adaptateurs disponibles pour passer en 24 mm mâle, ½" mâle, ½" femelle ou connexion non fileté)

## ► CONDITIONS D'UTILISATION

- **Température de service** : 0-40°C
- **Température maximale** : 70°C à 2 bar pendant 30 minutes réparties sur la durée de vie du produit
- **Pression de service maximale** : 5 bar
- **Débit** :
  - Filtre douche : 6 L/min (avec limiteur de débit – recommandé)
  - Filtre robinet : 4 L/min (avec limiteur de débit – obligatoire)




## ► REMPLACEMENT DES CAPSULES

Les images ci-dessous illustrent le changement de capsule sur un filtre douche. La procédure est la même pour les filtres robinets (la procédure détaillée est donnée dans les manuels d'utilisation des produits) :

- A l'aide de la clé de démontage, appuyer sur le système de blocage
- Retirer la capsule usagée
- Sortir une capsule neuve de son emballage stérile et l'insérer dans le manche
- Un déclic indique qu'elle est correctement insérée



## ► COURBES DE DEBIT

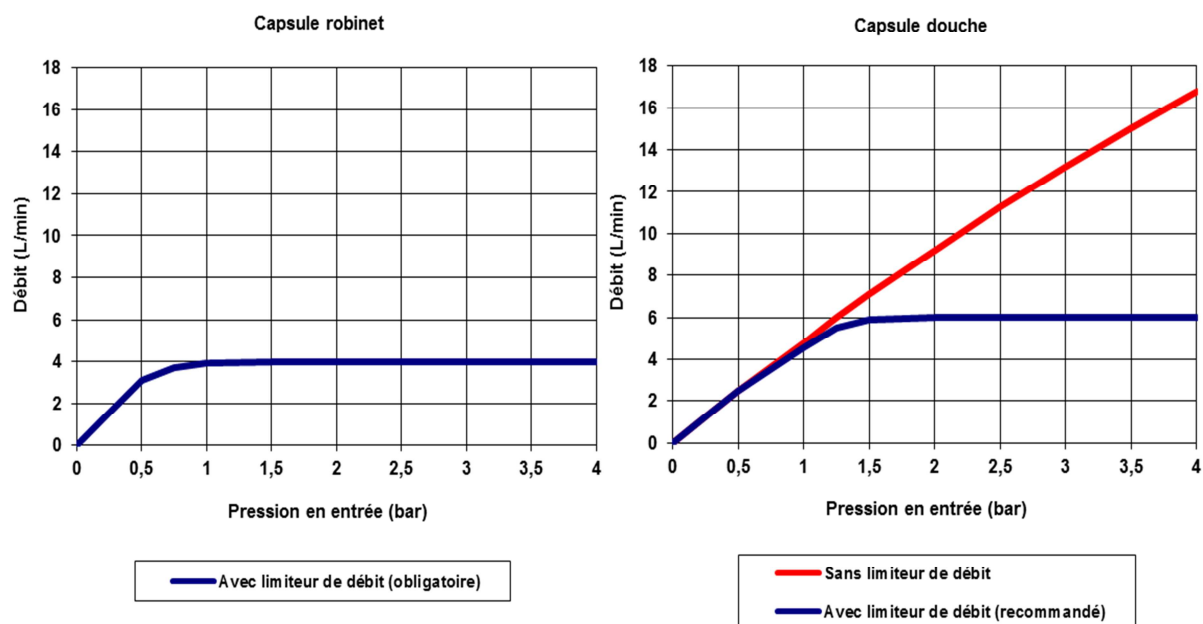

## ► CONDITIONS DE STOCKAGE

- Dans l'emballage d'origine (produits emballés individuellement et conditionnés par boîte de 12)
- Dans un lieu sec entre -10 et +50°C, normalement ventilé et loin de toute source de chaleur, combustion ou lumière solaire directe
- Ne pas exposer à des chocs
- Péréemption : **les produits ont une durée de vie de 2 ans après stérilisation par rayons gamma** (une étiquette collée sur l'emballage indique la date de péréemption)



► CORRESPONDANCES CAPSULES / ACCESSOIRES

Référence Efiltec Capsule douchette	Référence Efiltec Accessoires de série	Référence Efiltec Accessoires en option
Sortie douchette : <b>701001</b> 	Manche de douchette : <b>704100</b>  Clé de démontage : <b>704001</b> 	Régulateur de débit 6L/min pour filtre douchette: <b>704300</b> 
Référence Efiltec Capsule robinet	Référence Efiltec Accessoires de série	Référence Efiltec Accessoires en option
Sortie douchette : <b>703001</b> 	Connexion robinet : <b>704101</b>  Clé de démontage : <b>704001</b> 	Adaptateur robinet 22mm mâle-1/2" femelle: <b>704202</b>  Adaptateur robinet 22mm mâle-24mm mâle: <b>704201</b> 
Sortie droite : <b>703002</b> 	Régulateur de débit 4L/min pour filtre robinet : <b>704301</b> 	Adaptateur robinet 22mm mâle-1/2" mâle : <b>704203</b> 



## ► CERTIFICATIONS ET TRACABILITE

- Le système de management de la qualité de Pentair Filtrix est certifié **ISO 9001:2008**
- Les filtres médicaux jetables sont **marqués CE (classe I, règle 1)**
- Chaque filtre est marqué d'un **numéro d'identification unique**, permettant de remonter toute la chaîne de production
- Chaque filtre est fourni avec **2 étiquettes de date imperméables** (une à coller sur le filtre, une pour l'administration) permettant de noter la date de mise en service et la date de remplacement
- Les filtres médicaux Pentair Filtrix sont garantis **sans Bisphénol A**, sans **phtalates** et sans **latex**

